



Momoline

Handreichung


Für SmartEdge elite MO 001

Integrative Organisationslösungen für Laborarbeitsplätze





SmartEdge elite MO 001

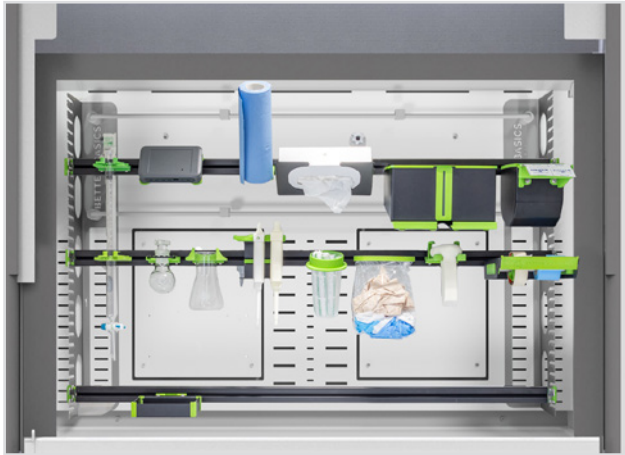

SmartEdge elite MO 001 in einem Momoline Laborabzug mit Laborarbeitsmitteln, Lieferumfang ohne Nutschienen, Glaswaren, Laborarbeitsmittel sowie Module.

Die SmartEdge elite MO 001 ist ein modulares Organisationssystem zur Installation in Momoline-Laborabzügen der AK-Serie. Sie besteht aus zwei Edelstahl-L-Profilen, die mittels mitgelieferten Adaptern, fest mit der hinteren Luftleitwand des Abzugs verbunden werden. Das System erlaubt eine flexible Anpassung an die Breite des jeweiligen Abzugs.

Durch Querverbinder in Form von präzisionsgefertigten Nutschienen entsteht an der Rückwand des Abzugs eine hochvariable Organisationsfläche, die sich exakt an individuelle Arbeitsanforderungen und an die vorhandene Abzugsarchitektur anpassen lässt. Alle Module sind vollständig mit den Nutschienen für SmartEdge elite MO 001 kompatibel. (Nutschienen und Module sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Die SmartEdge elite MO 001 gewährleistet eine stabile Befestigung, hohe Belastbarkeit und effiziente Raumausnutzung in Laborabzügen der AK-Serie von Momoline.

Die Funktionsfähigkeit der Abzüge wird durch die Installation der SmartEdge elite MO 001 nicht eingeschränkt.

Für die Montage der Smart Edge elite MO 001 sind keine baulichen Veränderungen am Abzug erforderlich. Nach Demontage der SmartEdge elite MO 001 befindet sich der Abzug wieder im ursprünglichen Zustand.




SmartEdge elite MO 001 in einem Momoline Laborabzug, unbestückt, Lieferumfang ohne Nutschienen.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge MO 001	elite	1	04012	229,00
Nutschiene für SmartEdge MO 001	in AK 900	1	04342	54,99
Nutschiene für SmartEdge MO 001	in AK 1200	1	04343	64,99
Nutschiene für SmartEdge MO 001	in AK 1500	1	04344	74,99
Nutschiene für SmartEdge MO 001	in AK 1800	1	04345	84,99
Nutschiene für SmartEdge MO 001	in AK 2100	1	04346	94,99
Nutschiene für SmartEdge MO 001	in AK 2400	1	04347	99,99



SmartEdge elite MO 002

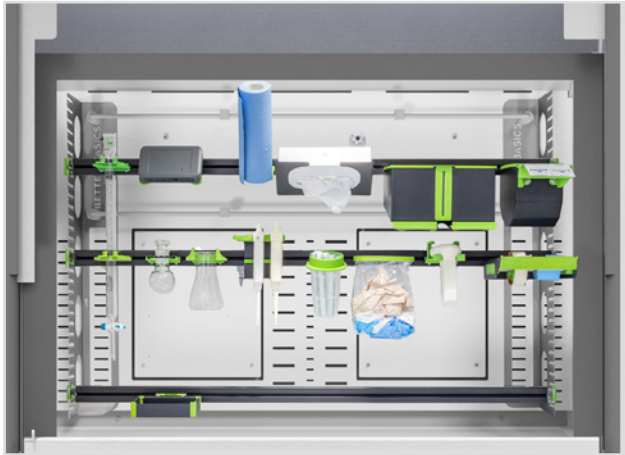

SmartEdge elite MO 002 in einem Momoline Laborabzug mit Laborarbeitsmitteln, Lieferumfang ohne Nutschienen, Glaswaren, Laborarbeitsmittel sowie Module.



SmartEdge elite MO 002 in einem Momoline Laborabzug, unbestückt, Lieferumfang ohne Nutschienen.

Die SmartEdge elite MO 002 ist ein modulares Organisationssystem zur Installation in Momoline-Laborabzügen der AK-Serie. Sie besteht aus zwei Edelstahl-L-Profilen, die zwischen der Luftleitwand im Abzug und daran befindlichen Aufnahmen für Stativaufbauten fest montiert werden. Das System erlaubt eine flexible Anpassung an die Breite des jeweiligen Abzugs.

Durch Querverbinder in Form von präzisionsgefertigten Nutschienen entsteht an der Rückwand des Abzugs eine hochvariable Organisationsfläche, die sich exakt an individuelle Arbeitsanforderungen und an die vorhandene Abzugsarchitektur anpassen lässt. Alle Module sind vollständig mit den Nutschienen für SmartEdge elite MO 002 kompatibel. (Nutschienen und Module sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Die SmartEdge elite MO 002 gewährleistet eine stabile Befestigung, hohe Belastbarkeit und effiziente Raumausnutzung in Laborabzügen der AK-Serie von Momoline.

Die Funktionsfähigkeit der Abzüge wird durch die Installation der SmartEdge elite MO 002 nicht eingeschränkt.

Für die Montage der Smart Edge elite MO 002 sind keine baulichen Veränderungen am Abzug erforderlich. Nach Demontage der SmartEdge elite MO 002 befindet sich der Abzug wieder im ursprünglichen Zustand.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge MO 002	elite	1	04013	229,00
Nutschiene für SmartEdge MO 002	in AK 900	1	04348	54,99
Nutschiene für SmartEdge MO 002	in AK 1200	1	04349	64,99
Nutschiene für SmartEdge MO 002	in AK 1500	1	04350	74,99
Nutschiene für SmartEdge MO 002	in AK 1800	1	04351	84,99
Nutschiene für SmartEdge MO 002	in AK 2100	1	04352	94,99
Nutschiene für SmartEdge MO 002	in AK 2400	1	04353	99,99

Technische Informationen

Technische Informationen:

- Alle Produkte sind mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar.
- Darüber hinaus können alle Bestandteile mit alkoholischen Desinfektionsmitteln abgewischt werden.
- Die verwendeten Kunststoffe und Metalle sind zu 100% recyclebar.
- Unsere Produkte sind bis 134 °C und 3 bar autoklavierbar.
- Die Kunststoffelemente sind unter laborüblichen Umgebungsbedingungen wärmeformbeständig.
- Zur schonenden Reinigung der eloxierten Aluminium-Nutschiene empfehlen wir die Verwendung eines pH-neutralen Handwaschmittels. Achten Sie darauf, dass das Handwaschmittel geruchsneutral ist und weder Duftstoffe, Fette noch Zusätze enthält. Reinigen Sie die Schiene per Hand und spülen Sie sie gründlich unter klarem Wasser ab.

Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS14:

- Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 17,2 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)
- Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 18,0 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS29:

- Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 31,4 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)
- Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 32,8 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

WICHTIG ZU BEACHTEN: Die Produkte der SmartIntegrate-Linie, das SmartRack® und SmartRack® mini sowie der SmartCase und SmartStand sind nicht für die dauerhafte Lagerung von Gefahrstoffen geeignet.

Technische Änderungen, Material- oder Modelländerungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei weiterführenden Fragen können Sie uns gern unter anfrage@better-basics.de kontaktieren.

Für weitere Detailinformationen besuchen Sie unsere Webseite:

Funktionsweise des SLS-3D-Druck:	www.sls-3d-druck.better-basics-laborbedarf.de
Beständigkeit gegenüber UV Licht:	www.uv-bestaendigkeit.better-basics-laborbedarf.de
Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien:	www.material-bestaendigkeit.better-basics-laborbedarf.de
Nachhaltigkeit und designeffiziente Fertigung:	www.nachhaltigkeit.better-basics-laborbedarf.de

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. | Gültig ab 01.01.2026

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Better Basics Laborbedarf GmbH.



Foto: Gebäude der Better Basics Laborbedarf GmbH in Dresden

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR UNSERE PRODUKTE ODER HABEN WEITERE FRAGEN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
anfrage@better-basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen finden Sie auch unter
www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH

Löbtauer Str. 69
01159 Dresden
Deutschland

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)
T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)
E: anfrage@better-basics.de
W: www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Unsere Bitte an Sie

Unsere Produkte aus der SmartIntegrate-Produktlinie sind nur so gut wie seine Nutzer. Mit unseren Wurzeln im Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden steht unser Unternehmen Better Basics Laborbedarf in der Tradition der Qualität „Made in Germany“. Diesem Markenzeichen deutscher Unternehmen, das für hohe Innovationskraft steht, fühlen wir uns in mehrfacher Hinsicht verpflichtet. Auch über unseren Produktkatalog hinaus gilt für uns bei Better Basics: Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie Ideen für Erweiterungen oder Verbesserungen haben oder Ihnen im Laboralltag etwas auffällt, was wir dringend optimieren sollten.

Wir wollen für Sie die bestmögliche Arbeitsumgebung im Labor schaffen und wir sind dankbar für jeden Hinweis und Ihre Inspiration. Nur in Kooperation mit Wissenschaftlern und Forschern können wir gemeinsam die Zukunft der Laborarbeit gestalten. Genau wie Sie suchen wir immer nach einem Weg, unsere Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH
Löbtauer Str. 69, D-01159 Dresden

E-Mail: info@better-basics.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mario Schneider
Handelsregister: HRB 39524; Registergericht: Amtsgericht Dresden
USt-IdNr. gem. § 27a UStG: DE327508812

